

signia

miniPocket

Käyttöohje



Content

Smart Key	4
Osat	5
Näppäinlukko	6
Kuulokojeiden yhdistäminen	7
Toimintojen yleiskatsaus	11
Lisätietoja	13
Puhdistus	13
Pariston vaihtaminen	14
Vianmääritys	17

Huolto	19
Signaalivahvuuden säätäminen	20
Tärkeitä turvallisuustietoja	22
Henkilöturvallisuus	22
Tuoteturvallisuus	24
Tärkeitä tietoja	27
Käyttötarkoitus	27
Symbolit	28
Käyttö-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet	30
Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä	31
Vaatimustenmukaisuustiedot	32
Maakohtaiset tiedot	33

Smart Key

miniPocket on kuulokojeiden kauko-ohjain. Se toimii erityisten, langattomien kuulokojeittemme kanssa. Kuulokojeasiantuntijasi kertoo sinulle yhteensopivista malleista.




VAROITUS

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan läpi, ja noudata tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita vaurioiden tai vahingoittumisen välttämiseksi.

Osat

- ① Tilan LED-ilmaisain
- ② Äänenvoimakkuuspainikkeet
- ③ Avainrengas
- ④ Näppäinlukon kytkin
- ⑤ Ohjelmanvaihtopainike
- ⑥ Paristoluukun avaustyökalu

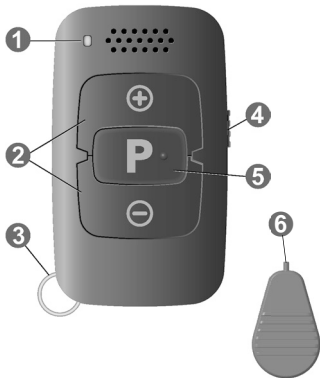

Näppäinlukko

- Tahattoman käytön estämiseksi kauko-ohjaimen ollessa taskussa tai laukussa näppäinlukon kytkin tulee siirtää lukitusasentoon (punainen väri näkyvissä).



Kun näppäinlukko on käytössä, kaikki kauko-ohjaimen painikkeet ovat pois käytöstä.

Kuulokojeiden yhdistäminen

Kuulokojeet on yhdistettävä kauko-ohjaimeen. Tämän jälkeen yhdistäminen tallennetaan kuulokojeisiin ja yhteys aktivoituu joka kerta, kun kojeet kytketään päälle.

- ▶ Lukitse kauko-ohjain (punainen väri näkyy).
- ▶ Kytke kuulokojeet ensin pois päältä:
Avaa paristolokerot. Jos kuulokojeissa ei ole paristolokeroita, kytke ne pois päältä käyttöohjeen mukaisesti.

- Kytke kuulokojeet päälle:

Sulje paristolokerot. Jos kuulokojeissa ei ole paristolokeroita, kytke ne päälle käyttöohjeen mukaisesti.

Kuulokojeet ovat nyt yhdistämistilassa. Viimeistele yhdistäminen 3 minuutin sisällä. Suorita seuraavat vaiheet.

- Aseta kuulokojeet korviisi.
- Pidä kauko-ohjaimen **P**-painiketta painettuna ja liu'uta näppäinlukko auki (vihreä väri näkyy).
- Vapauta **P**-painike.

Kauko-ohjain on nyt asetustilassa ja LED-ilmaisina palaa.



Kauko-ohjaimen ollessa asetustilassa, älä paina ⊕ tai ⊖. Muutoin muut asetukset voivat muuttua.

- ▶ Pidä **P**-painiketta painettuna, kunnes yhdistämisen vahvistusäänimerkki kuuluu kuulokojeista. Tämä vie noin 2 sekuntia.
- ▶ Varmista, että vahvistusäänimerkki kuuluu molemmista kojeista. Yhdistäminen on valmis, kun äänimerkki kuuluu.

Kauko-ohjain pysyy asetustilassa 30 sekuntia tämän jälkeen. Voit kuulla vahvistusäänimerkin uudelleen painamalla **P**-painiketta 30 sekunnin sisällä.

- Voit poistua kauko-ohjaimen asetustilasta odottamalla 30 sekuntia tai siirtämällä näppäinlukon kytkimen lukitusasentoon (punainen väri näkyy).

Kun yhdistäminen päättyy, kauko-ohjain on käyttövalmis.

- Varmista, ettei se ole lukittu (vihreä väri näkyy).

Mikäli kuulokojeita ei voitu yhdistää, katso ”Vianmääritys”.

Toimintojen yleiskatsaus

Toiminto	Kuvaus
Voimakkuus	⊕ tai ⊖ Säädä äänenvoimakkuutta porrastetusti painamalla painiketta toistuvasti. Tai pidä painettuna, kunnes haluttu äänenvoimakkuus on saavutettu.
Kuulo-ohjelma	P lyhyt painallus ➤ Vaihtaa seuraavaan kuulo-ohjelmaan.

Toiminto	Kuvaus
Kytke päälle/ pois päältä (valmiustilaan)	P ja ⊖ pitkä painallus (2 sekuntia) ➤ Kytkee kuulokojeet päälle tai pois päältä.
Palauta oletusarvot	P pitkä painallus (2 sekuntia) ➤ Vaihtaa kuulo-ohjelmaan 1 ja asettaa oletusäänenvoimakkuustason.

Lisätietoja

Puhdistus



HUOMAA

- ▶ Älä pane kauko-ohjainta veteen!
- ▶ Älä puhdista kauko-ohjainta alkoholilla tai bensiinillä.



- ▶ Puhdista kauko-ohjain tarpeen mukaan kuivalla tai hieman kostealla, pehmeällä liinalla.
Käytä ainoastaan tislattua vettä liinan kostuttamiseen.
- ▶ Vältä kaikkia puhdistusaineita.

Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjain käyttää CR 2450 -nappiparistoa.

- Tähtää työkalun kärki paristoluukun kannen yläpuolella olevaan avaimenreikään **1**.
- Paina työkalu pystysuunnassa reikään ja liu'uta samaan aikaan paristokotelon luukkua nuolen suunnassa **2**.
- Poista tyhjä paristo vetämällä liuskasta **3**.



Huomio: Käytä mukana toimitettua työkalua avataksesi paristokotelon luukun. Itsetehdyt työkalut, kuten paperiliittimet voivat vahingoittaa lapsilukkoa.

Aseta paristo "+"-symboli ylöspäin.

- Liu'uta se pidikkeen alle ja paina alaspäin.



- Kiinnitä kansi liu'uttamalla se takaisin kauko-ohjaimeen.



- Sulkeminen: liu'uta paristokotelon luukku paikoilleen ja kuulet "napsahduksen" kun lapsilukko on kunnolla paikoillaan. ③

Kauko-ohjain aktivoi kauko-ohjaimen ja kuulokojeiden yhteyden tämän jälkeen. Kuulokojeita ei tarvitse yhdistää uudelleen pariston vaihdon jälkeen.

Vianmääritys

Mikäli laite ei toimi:

- Varmista, että paristo on asetettu paikalleen oikein. Katso luku "Pariston vaihtaminen".
- Varmista, ettei näppäimiä ole lukittu. Katso luku "Näppäinlukko".
- Varmista, ettei kuulokojeiden ja kauko-ohjaimen välillä ole esineitä.

- Lisää signaalivoimakkuutta. Katso luku "Signaalivoimakkuuden säätäminen".
- Yhdistä kuulokojeet uudelleen. Katso kohta "Kuulokojeiden yhdistäminen".
- Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi, onko kauko-ohjain yhteensopiva kuulokojeidesi kanssa.

Mikäli kuulokojeita ei voida yhdistää:

- Lisää signaalivoimakkuutta. Katso luku "Signaalivoimakkuuden säätäminen".
- Yhdistä kuulokojeet uudelleen. Katso kohta "Kuulokojeiden yhdistäminen".

Mikäli LED-ilmaisin ei pala:

- Varmista, ettei näppäimiä ole lukittu. Katso luku "Näppäinlukko".
- Paristovirta voi olla vähissä. Vaihda tyhjä paristo uuteen.

Ota yhteyttä kuulokojeasiantuntijaasi, jos muita ongelmia ilmenee.

Huolto

Jos koet teknisiä ongelmia, ota yhteys kuulokojeasiantuntijaasi huoltoa varten. Älä huolla laitetta käytön aikana.

Signaalivahvuuden säätäminen

Kauko-ohjain toimii lähettämällä korkeataajuisia äänisignaalia. Alle 30-vuotiaat voivat kuulla tämän signaalin. Ohjaussignaali voi toimia kahdella voimakkuustasolla. Kauko-ohjain käyttää oletusarvoisesti voimakkainta asetusta luotettavan yhteyden varmistamiseksi kuulokojeisiin. Heikompaa signaalia voidaan käyttää, mikäli ohjaussignaali häiritsee muita. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa yhteyden luotettavuuteen.

Voit säätää signaalivoimakkuutta seuraavasti:

- ▶ Lukitse kauko-ohjain (punainen väri näkyy).
- ▶ Pidä kauko-ohjaimen **P**-painiketta painettuna ja liu'uta näppäinlukko auki (vihreä väri näkyy).

- ▶ Vapauta **P**-painike.
Kauko-ohjain on nyt asetustilassa: LED-ilmaisin palaa ja signaalivoimakkuutta voidaan muuttaa.
- ▶ Voit vaihtaa **heikompaan** signaalivoimakkuuteen painamalla ⊖-painiketta, kunnes LED-ilmaisin vilkkuu hitaasti.
Voit vaihtaa **voimakkaampaan** signaalivoimakkuuteen painamalla ⊕-painiketta, kunnes LED-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
- ▶ Voit poistua kauko-ohjaimen asetustilasta odottamalla 30 sekuntia tai siirtämällä näppäinlukon kytkimen lukitusasentoon (punainen väri näkyy).
- ▶ Voit jatkaa kauko-ohjaimen käyttöä varmistamalla, ettei se ole lukittu (vihreä väri näkyy).

Tärkeitä turvallisuustietoja

Henkilöturvallisuus



VAROITUS

Tukehtumisvaara!

Kojeesi sisältää pieniä osia, jotka on mahdollista niellä.

- ▶ Säilytä kuulokojeet, paristot ja lisävarusteet poissa lasten ja kehitysvammaisten henkilöiden ulottuvilta.
- ▶ Mikäli osat ovat joutuneet niellyiksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan.



VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

- Älä käytä selkeästi vaurioitunutta kojetta, vaan palauta se ostopaikkaan.



VAROITUS

Huomaa, että tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset saattavat vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoa.

- Käytä vain hyväksytyjä osia ja lisävarusteita. Pyydä apua kuulokojeasiantuntijaltasi.



VAROITUS

Räjähdysvaara!

- ▶ Älä käytä kaukosäädintä räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. kaivostyöalueilla).

Tuoteturvallisuus



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita äärimmäiseltä kuumuudelta. Älä altista niitä suoralle auringonvalolle.



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita korkealta kosteudelta.



HUOMAA

- ▶ Älä kuivaa kojeita mikroaaltouunissa.



HUOMAA

Erilaiset voimakkaan säteilyt esim. röntgen- tai MRI-päätutkimusten aikana, saattavat vaurioittaa kojeita.

- ▶ Älä käytä kojeita näiden tai muiden samankaltaisten toimenpiteiden aikana.

Heikompi säteily esim. radiolaitteistosta tai lentokentän turvallisuuslaitteista ei vaurioita kojeita.



HUOMAA

- Kauko-ohjaimesi on ohjelmoitu yksinomaan tiedonvälitykseen kuulokojeittesi kanssa. Mikäli havaitset ongelmia, jotka johtuvat jonkun toisen henkilön kauko-ohjaimesta, ota yhteyttä kuulokojeasiantuntijaasi.

Tärkeitä tietoja

Käyttötarkoitus

Kauko-ohjain on tarkoitettu kuulokojeiden hallintaan.



Käytä kauko-ohjainta vain tässä käyttöohjeessa kuvaillulla tavalla.

Laitetta ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille tai henkilöille, joiden kehitystaso vastaa alle 12-vuotiaan lapsen tasoa.

Symbolit

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit



Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa johtaa vakaviin, keskivaikeisiin tai pieniin vammoihin.



Ilmoittaa mahdollisesta omaisuusvahingosta.



Neuvoja ja vihjeitä kojeen parempaan käsittelyyn.

Symbolit laitteessa tai pakkauksessa



Lue ja noudata käyttöohjeen ohjeita.



CE-yhdenmukaisuusmerkintä, vahvistaa tiettyjen EU-direktiivien noudattamisen.

Katso osa "Yhdenmukaisuustiedot".



Älä hävitä kojetta talousjätteen mukana.

Katso osa "Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä".



Käyttö-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet

Käyttöolosuhteet

Lämpötila	0–45 °C
-----------	---------

Suhteellinen kosteus	5–93 %
----------------------	--------

Seuraavien ehtojen on täyttyttävä, jos kuljetus- tai säilytysajat ovat pitkiä:

	Säilytys	Kuljetus
Lämpötila	10–40 °C	-20–60 °C
Suhteellinen kosteus	10–80 %	5–90 %

Muita osia, kuten paristoja, saattavat koskea jotkut muut olosuhteet.

Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä

Euroopan unionin alueella merkityn laitteiston kattaa "Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. tammikuuta 2003 antama direktiivi 2002/96/EY koskien sähkö- ja elektroniikkaromua".

Muutettu "direktiivillä 2003/108/EY" (WEEE).



HUOMAA

- Kierrätä kuulokojeet, lisävarusteet ja pakkausmateriaali kansallisten määräysten mukaisesti.



HUOMAA

- ▶ Älä heitä paristoja kotitalousjätteen sekaan ympäristön saastumisen välttämiseksi.
- ▶ Kierrätä tai hävitä paristot kansallisten määräysten mukaisesti tai palauta ne kuulokojeliikkeeseen.

Vaatimustenmukaisuustiedot

CE-merkinnällä ilmoitetaan, että tuote on seuraavien EU-direktiivien mukainen: 93/42/EECKoskien lääkinnällisiä laitteita ja 2011/65/EY RoHS koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista.



Maakohtaiset tiedot



Laillinen valmistaja

WSAUD A/S

Nymøllevej 6,

3540 Lynge

Tanska

Document No. 02984-99T03-7300 FI

Order/Item No. 109 407 48

Master Rev04, 10.2020

© 02.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia-hearing.com